

# ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL  
BRUKSANVISNING  
BRUGSANVISNING  
OHJEKIRJA  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

DANSK


# VELKOMMEN TIL DIN ELOFLEX

Tak, fordi du har valgt Eloflex som din el-kørestol. Vi er glade for, at du har valgt Eloflex, da vores mission er at forenkle hverdagen og øge friheden for mennesker med mobilitetsudfordringer. Vi håber, at din Eloflex giver dig mulighed for at nyde begge fordele.

At bruge din nye el-kørestol skal være en givende oplevelse. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Vi anbefaler kraftigt, at du læser hele dokumentet igennem, før du bruger din Eloflex for første gang. Det er også tilrådeligt at øve dig i at betjene din Eloflex i et roligt, åbent og plant område, før du bevæger dig ud i andre miljøer.

Vi er her for at støtte dig, når du begynder at bruge din Eloflex. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

**Held og lykke og stor glæde med din Eloflex.  
Kør forsigtigt!**

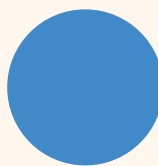

## INDHOLD

Tilsigtet brug	3	Armlæn / Ryglænt	11
Udfoldning / Foldning	4	Juster ryglænet / Lændestøtte	12
Skille ad / Samle	5	Låsemekanisme / Tipsikring / Manuel kørsel	13
Opladning	6	Sikkerhedssele / Transport og opbevaring	14
Monter joysticket / Folde joysticket nedt	7	Kørsel	15
Brug af joysticket	8	Sikkerhedsinstruktioner ved kørsel / Sikkerhed	16
Yderligere funktioner	9	Generelle sikkerhedsanvisningert	17
Fodstøtte	10	Tekniske specifikationer	18

# TILSIGTET BRUG

---

## Klassificering og tilsigtet brug

Eloflex el-kørestole er udviklet til personer, der har svært ved at gå eller slet ikke kan gå, men som har synet og de fysiske og mentale evner til at styre en el-kørestol.

Eloflex el-kørestolen er tilstrækkelig kompakt og fleksibel til indendørs brug, men den er også velegnet til udendørs brug. Kapitlet ""Tekniske data"" bagest i dette dokument indeholder oplysninger om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal løftekapacitet, maksimal brugervægt osv.

Eloflex er testet og godkendt i henhold til EN12184:2014 - Klasse B (indendørs og udendørs brug). Eloflex er også godkendt i henhold til ISO-7176, IEC60601, og batterierne er godkendt i henhold til UN38.3.

Eloflex el-kørestole opfylder de gældende krav i MDR 2017/745.

MDR klasse 1 overensstemmelsesvurdering/CE-mærkning er udstedt i overensstemmelse med bilag VIII kapitel III i MDR 2017/745. Procedure for overensstemmelsesvurdering: Bilag II og bilag III til MDR 2017/745. CE-mærkningen bortfalder, hvis du bruger erstatningskomponenter eller tilbehør, der ikke er godkendt til dette produkt.

## Behov

Formålet med en Eloflex el-kørestol er at kompensere for en skade eller et handicap, og den anbefales under følgende omstændigheder:

- Hvis brugeren er ude af stand til at gå eller har meget begrænset evne til at gå, hvilket gør det vanskeligt at bevæge sig i sit eget hjem.
- Hvis der er behov for at forlade hjemmet for at gå ud eller besøge steder, der regelmæssigt besøges i hverdagen.
- - Når brugeren har svært ved at nå eller udføre arbejde eller aktiviteter på grund af bevægelseshandicap.

Det anbefales at bruge Eloflex el-kørestole både indendørs og udendørs, hvis det ikke er muligt at bruge håndbetjent kørestole på grund af mobilitetsproblemer, men det stadig er muligt at håndtere el-kørestole korrekt.

## Tilbehør

Oplader, reflekser og en taske med enkle værktøjer findes i opbevaringstasken under sædet ved levering.

## Anvendelsesområde

Brug kun Eloflex el-kørestolen, når den er fuldt funktionsdygtig, ellers udsætter du dig selv og andre for fare. Den følgende liste omfatter ikke alle mulige situationer, men beskriver visse forhold, der kan påvirke el-kørestolens anvendelighed:

- Brug ikke el-kørestolen, hvis batterierne er defekte eller deforme.
- Brug ikke el-kørestolen, hvis motoren rykker eller laver unormale lyde.
- Brug ikke el-kørestolen, hvis bremsefunktionen ser ud til at være defekt.
- Hvis dækkene er slidte, skal du kontakte dit servicecenter eller din forhandler.
- Hvis du opdager skader på sikkerhedsselen, armlænet, sædet, ryglænet, joysticket eller andre dele af stolen, skal du kontakte dit servicecenter eller din forhandler.
- Hvis du opdager skader på det elektriske system (kabler, batterier, opladere osv.), skal du kontakte dit servicecenter eller din forhandler.

## Producentens garanti

Eloflex-garantien dækker udskiftning af dele, der er gået i stykker, forudsat at skaden ikke er forårsaget af brugeren. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre omstændigheder som tyveri, misbrug, forkert brug, lynnedslag eller ændringer.

## Levetid

Den anslåede levetid for en Eloflex er 5 år. Produktets levetid påvirkes dog i høj grad af, hvordan det bruges og vedligeholdes. En Eloflex kan holde meget længere, hvis den bliver passet godt på og brugt i overensstemmelse med oplysningerne i dette dokument.

## Sikkerhedsforskrifter og risici

BRUGEREN SKAL LÆSE SIKKERHEDS- OG KØREANVISNINGERNE I DETTE DOKUMENT, FØR ELOFLEX-KØRESTOLEN TAGES I BRUG.

# BRETTE UT OG BRETT SAMMEN

---


1. Placer den sammenklappede stol på jorden som vist nedenfor. Løsne transportlåsen som sitter

på baksiden. Hold ryggstøtten og dra den oppover for å åpne stolen. Med den andre hånden, trykk setet

nedover til du hører et tydelig "klikk", som indikerer at låsen er aktivert.



2. **Viktig!** Sørg for at låsen er helt lukket for å sikre stolen i utslått posisjon.

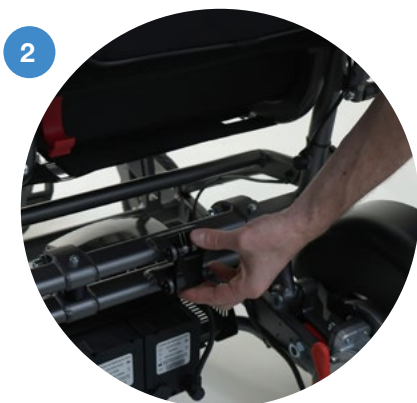


**Kontroller låsen før bruk.**

1. Trykk på den røde knappen for å løsne hovedlåsen som vist på bildet.

2. Plasser den ene hånden på forsiden av seteputen. Ta tak i toppen av ryggstøtten med den andre hånden og brett den forover. Skyv stolen sammen som vist. **Klempunkter!** Vær forsiktig når du bretter sammen.


3. En praktisk transportlås kan kobles inn or å holde rullestolen i sammenfoldet stilling. Roter transportlåsen til den låser den motsatte stangen.

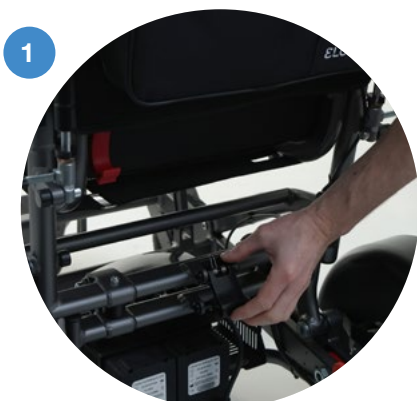

## SKILLE AD

---


1. Sørg for, at stolen er helt sammenklappet, og at armlænene er sænket. Vip tip-sikringerne opad. Løft derefter stolen til opret position.
2. Tryk på den røde håndtag for at frigøre låsemekanismen.
3. Løft den øverste del lige op, indtil den kan adskilles helt. Da delene er tunge og kan vælte, vær forsigtig ved håndtering af dem separat i opret position.

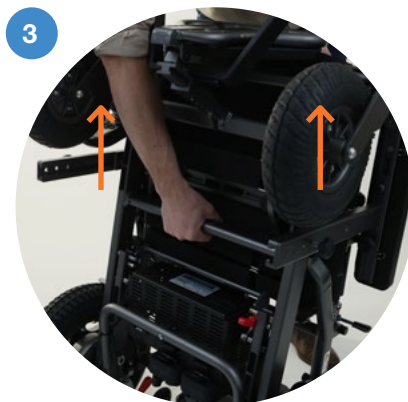

## SAMLE

---

1. Løft den øverste del og placer den korrekt ved hjælp af styreskinnerne på den nederste del. Låsemekanismen går automatisk i indgreb, du hører et klik, og stikket er tilsluttet, når den øverste del er helt på plads.
2. **Forsigtig:** Efter samling skal låsemekanismen kontrolleres for at sikre, at den er korrekt låst før brug.
3. Fold stolen ud igen. Sørg for, at låsekrogen er lukket, før du tænder den elektriske kørestol og bruger den.

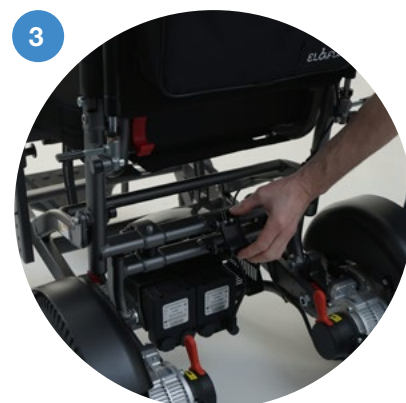

# OPLADNING

---

## Før du går i gang

- Oplad din Eloflex ved levering.
- Brug kun den originale oplader, der fulgte med din Eloflex.
- Opladeren er kun beregnet til at blive tilsluttet joysticket, ikke direkte til batterierne.
- Oplad mindst hver 3. måned for at forhindre permanent skade på batteriet.

## Sådan oplader du

Forsøg at oplade din Eloflex efter hver tur, eller når batteriindikatoren på joysticket falder til tre streger.

Start med at slukke for din Eloflex (alle lys på joysticket skal være slukket).

Tilslut opladeren til stikket på forsiden af joysticket. Sørg for, at kontakterne passer sammen.

Sæt opladerens strømkabel i en stikkontakt. Opladning indikeres af en lampe på opladeren. Et rødt lys betyder, at opladningen er i gang.

Efter ca. tre timer er batterierne 90 procent opladet, og stolen kan bruges.

Efter ca. 5-8 timer lyser opladeren grønt, hvilket betyder, at batterierne er fuldt opladede. Under opladningen bliver opladeren varm, hvilket er normalt.

Kobl altid opladeren fra både stikkontakten og kørestolen, når opladningen er færdig. Oplad aldrig uden opsyn. Batterierne kan oplades

ned til 0 grader. Ved opladning ved lavere temperaturer er det ikke sikkert, at batterierne oplades helt.

Hvis din Eloflex bruges i temperaturer under frysepunktet, påvirkes rækkevidden. Ved f.eks. -10 grader kan rækkevidden reduceres med op til 50 %.

## Langvarig opbevaring

Batterierne kan tage permanent skade, hvis spændingen bliver for lav.

Vi anbefaler at frakoble batterierne for at minimere afladning og oplade dem regelmæssigt (mindst en gang hver 3. måned).

Lad aldrig opladeren være permanent tilsluttet.



**Hvis batterierne ikke oplades regelmæssigt, vil de tage permanent skade.**

# MONTER JOYSTICKET

---

1. Monter joystick ved at samle hurtiglåsen på armlænet med låsen (A) vendt udad. Juster møtrikken (B), så låsen kan lukkes helt og sikkert holde joysticket på plads. Joysticket kan monteres på højre eller venstre

side med en adapter, der kan købes separat.

2. Sæt kabelstikkene sammen, og drej dem forsigtigt, indtil stifterne passer ind i hullerne, og rillerne i begge stik passer sammen. Skru derefter mufferne godt fast på hvert forbindelsespunkt.



Vær forsigtig, så du ikke beskadiger eller bøjer stifterne i stikket.

# FOLDE JOYSTICKET NED

---

Det smarte joystickbeslag gør det muligt for brugeren hurtigt at sænke joysticket uden at fjerne det. Dette betyder, at du kommer tættere på bordkanten, hvilket giver en bedre siddestilling.

1. Løft låsearmen for at frigøre joysticket.
2. Træk joysticket forsigtigt fremad. Lad derefter joysticket hænge lodret ned.



# BRUG AF JOYSTICKET

## 1. LCD-skærm

## 2. Multifunktionelle knapper

## 3. USB-stik

TIP: Brug USB-stikket under joysticket til at oplade din mobiltelefon.

## 4. Indgang til oplader

## 5. Lys

## 6. Hastighedsmåler

Viser din aktuelle hastighed.

## 7. Hastighedsindstilling

Viser den afstand, du har tilbagelagt, og din aktuelle hastighed.

## 8. Trip/ODO-måler

Viser den kørte distance siden sidste

tænding (trip) eller den samlede distance for køretøjet (ODO).


## 9. Batteriniveau

Angiver den resterende strøm i batterierne. Når de er fuldt opladede, er alle søjler hvide. Det anbefales at oplade, når tre søjler er brugt.



### Joystick

Styrer stolens hastighed og retning.

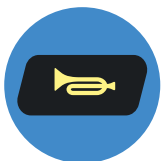

### Horn

Tryk for at påkalde opmærksomhed.



### Sænk hastigheden:

Tryk for at få stolen til at køre langsommere.



### Tænd og sluk

Tryk for at tænde eller slukke for din Eloflex.



### Øg hastigheden:

Tryk for at få stolen til at køre hurtigere.



### Tænd/sluk lys

Tryk for at tænde eller slukke for lyset.



# YDERLIGERE FUNKTIONER

---

## Justering af indstillinger

Du kan ændre stolens indstillinger, herunder sprog, hornvolumen og måleenheder.

1. Tryk på den højre multifunktionsknop for at få adgang til indstillingerne. Dette vil vise en liste over muligheder.
2. Brug hastighedsknapperne til at rulle op og ned gennem listen med indstillinger.
3. Vælg en funktion ved at trykke på den højre multifunktionsknop (Enter), eller gå et skridt tilbage ved at trykke på den venstre multifunktionsknop (Return).

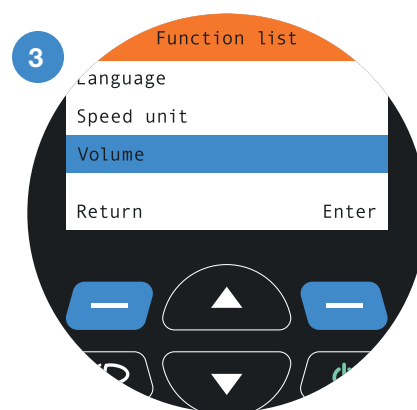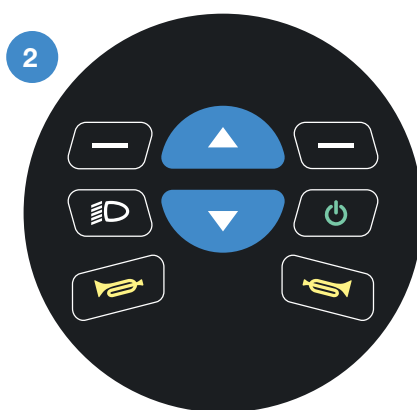

## Lås /Børnesikkerhed

Du kan låse din Eloflex elektronisk ved at trykke på pil op og pil ned samtidig i 3 sekunder. Et lille symbol øverst i displayet vil indikere, at låsen er aktiveret. (Joysticket skal være tændt for at låse/oplåse).

## USB-opladningsport

USB-porten kan oplade mobiltelefoner,

iPads og andre bærbare enheder.

Den leverer 5 V strøm med en opladningsstrøm, der bestemmes af den tilsluttede enhed, op til maksimalt 2,1 A.

## Advarsler

Displayet kan vise fejlkoder for at indikere fejl. Fejlkode 1 og 2 indikerer, at magnetbremserne er aktive.

## Fjernbetjening via app

Eloflex-kørestolen kan styres via en app. Brug QR-koderne nedenfor til at downloade den. Kontakt din forhandler for detaljerede instruktioner, hvis det er nødvendigt. BEMÆRK: App-styring bør ikke bruges som en assisterende styringsenhed (f.eks. når en person sidder i stolen).



# FODSTØTTE

---

## Fold fodstøtten op

For at lette ind- og udstigning kan fodstøtten foldes op og ind som vist nedenfor.




## Juster fodstøtten

Du kan justere højden på fodstøtten til to faste positioner.

1. Stram fastskruerne **(A)**, mens du holder møtrikken.

2. Fjern det sorte plastdæksel fra møtrikkerne.

3. Monter fodstøtten igen i det alternative monteringshul. Hvis fodstøtten ikke forbliver i hævet position, kan du justere spændingen ved at stramme fastskruerne **(B)**.

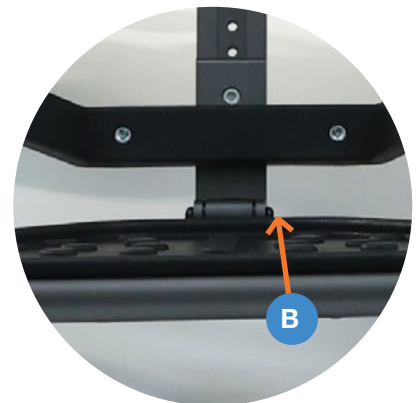

**Bemærk:** Monter lægstøtten, hvis den ikke allerede er installeret, ved at fastgøre den medfølgende beslag til midtersøjlen med én skrue. Fastgør derefter lægstøtten til beslaget med to skruer.

# ARMLÆN



---

## Juster armlænene.

Juster højden til en af tre positioner ved først at løsne fastgørelsesskruen **(A)** og derefter trække den indvendige lås **(B)**. Efter justering stram skruen igen for at forhindre raslen.

Armlænet har to foldede positioner, én næsten helt nede til sammenklapning og transport, og én helt på linje med sædet for lettere ind- og udstigning. Juster bredden med skrue **(C)**.

Juster armlænet vandret (frem eller tilbage) ved at trykke på den lille knap under armlænet **(D)** og skubbe puden. Slip knappen for at låse den fast.

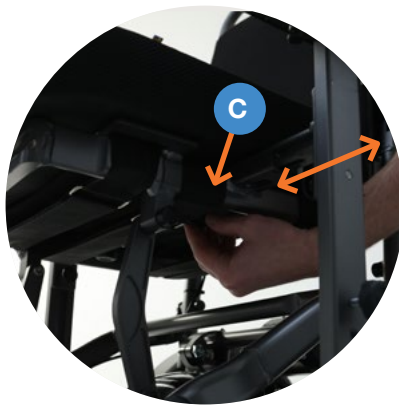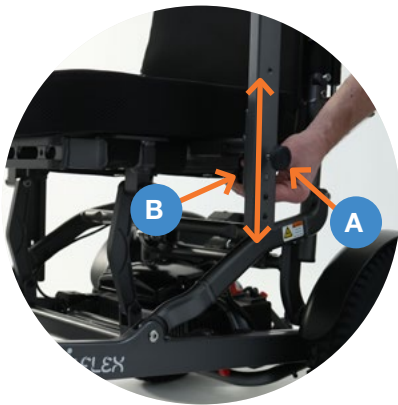

# RYGLÆN

---

## Vip ryglænet

For at ændre vinklen på ryglænet trinvis, tryk ned spakene på begge sider. Læn ryglænet til en behagelig position og slip derefter spakene for at låse det på plads.

## Juster højden.


Ryglænets højde justeres ved at løsne skruerne **(A)**. Når det er indstillet i høj position, kan toppen af ryglænet bruges som håndtag til transport af den sammenklappede stol.



# JUSTER RYGLÆNET

---

Træk ryglænet op for at folde det **(A)**.  
Stram velcrobåndene for at opnå en  
behagelig siddestilling **(B)**. Fold derefter  
ryglænet ned igen og tryk let for at fastgøre  
det til velcrobåndene.

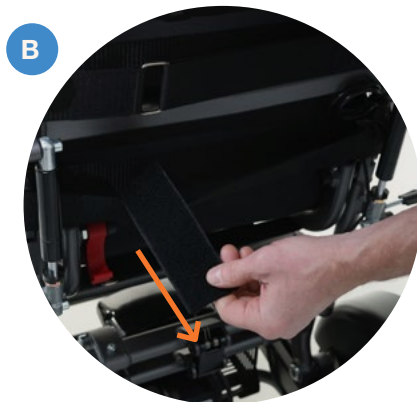



## TIPSIKRING

---

Tipsikringen skal ikke justeres, men kan trækkes tilbage under transport på nogle modeller. Kørestolen må ikke bruges, uden at tipsikringen er aktiv, da der er risiko for alvorlige skader. Kontrollér den før hver brug.



**RISIKO FOR SKADER!**  
Sørg altid for, at tipsikringen er aktiv.

## MANUEL KØRSEL

---

Sluk for el-kørestolen med joysticket. Tryk derefter på de røde håndtag på motorene (se billede) for at frakoble magnetbremsene. I denne position kan stolen rulles manuelt.

**Vær opmærksom!** Hvis brugeren anvender stolen uden hjælp, skal stolens magnetlås altid være slået til.



**Skub ikke de røde håndtag med foden, brug kun hænderne.**

## SIKKERHEDSSELE

---

For sikker kørsel anbefaler vi altid at bruge sikkerhedsselen, når stolen betjenes.



## TRANSPORT OG OPBEVARING

---

- Når stolen skal løftes, anbefales det, at den først foldes sammen, så den ligger fladt, og derefter løftes op i lodret position, før den til sidst løftes.
- En sammenfoldet stol kan lægges i bagagerummet på en bil eller sættes ind i et klædeskab.
- Fold joysticket ned eller fjern det under transport.
- Hvis stolen ikke skal bruges i et stykke tid, skal den opbevares korrekt, og batterierne skal oplades med jævne mellemrum i henhold til kapitlet "Sådan oplades den". Ellers kan stolen blive ubrugelig.
- Stolen skal opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Hyndebetræk er aftagelige og kan vaskes ved 40 °C.
- Ved transport med bus eller handicaptransport skal Eloflex fastgøres til de fastgørelsespunkter **(1-4)** der er vist på billederne nederst. **Bemærk venligst!** Eloflex er ikke testet eller godkendt som autostol. Derfor er det ikke tilladt at sidde i Eloflex under biltransport.
- Ved flytransport bedes du kontakte dit flyselskab før både booking og check-in. Eloflex følger IATA's anbefalinger.



# KØRSEL

---

## Læs

Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner, før Eloflex el-kørestolen tages i brug.

## Øvelse

Øvelse gør mester. Træn i at køre din Eloflex sammen med en hjælper ved at starte på en åben overflade, helst udendørs, før du bruger din el-kørestol blandt andre mennesker, i butikker eller restauranter osv. Kør fremad ved at bevæge joysticket langsomt fremad. Stop ved at slippe joysticket.

## Kør baglæns

Bak ved at bevæge joysticket langsomt baglæns. Slip joysticket for at stoppe. Husk altid at kigge bagud, før du begynder at bakke, så du er sikker på, at der ikke er nogen personer eller ting i vejen.

## Spinn

Drej ved at bevæge joysticket forsigtigt sidelæns. Pas på, at der ikke er noget i vejen for siderne, når du drejer.

## Drej

Drej, mens du kører, ved forsigtigt at bevæge joysticket sidelæns i samme retning, som du vil dreje. Sænk altid hastigheden, når du drejer.

## Forhindring

Øv dig i at undgå og passere

forhindringer. Bevæg joysticket sidelæns, mens du kører fremad, for at undgå forhindringer. Husk at sænke hastigheden, når du nærmer dig en forhindring.

## Hurtig kørsel

Hurtig kørsel: Tryk joysticket i fremadgående position, hvis du vil køre hurtigt. Husk at trække joysticket tilbage og sænke hastigheden, så snart du føler dig usikker, uanset om du drejer eller nærmer dig en forhindring

## Kør over forhindringer

Kør langsomt hen til forhindringen, og sørg for, at forhjulene er i kørselsretningen. Bevæg derefter joysticket langsomt fremad, mens du læner dig bagud, for at køre over forhindringen Eloflex er testet og godkendt til forhindringer på op til 6 cm.

## Skrånende overflader

Prøv at køre lige op eller ned ad en skrånende overflade. Læn dig lidt fremad, når du kører op, og bagud, når du kører ned, for at bevare tyngdepunktet. Undgå så vidt muligt at køre sidelæns, og kompensér for en eventuel sidehældning ved at læne dig i den modsatte retning. Kør altid langsomt på skråninger, og vær opmærksom på, at bremselængden kan være betydeligt større end på jævnt underlag. Den

maksimalt tilladte hældningsvinkel for denne kørestol er 9 grader. Selv om din Eloflex er i stand til det, skal du undgå at køre på skråninger, der er større end den krævede testvinkel, på grund af risikoen for alvorlige skader i tilfælde af væltning.

## Elevatore

Husk at tjekke bredden på elevatordøren, og hvor hurtigt døren lukkes, før du går ind i elevatoren. Husk, at du kan blive nødt til at bakke ud af elevatoren, hvis den ikke er stor nok til, at du kan vende om.

## Kørsel på vejen

Kør primært på fortove, gang- og cykelstier.

## Kryds vejbanen

Hvis det er muligt, skal du altid vælge at krydse vejen ved en fodgængerovergang. Vær opmærksom på krydsende biler. Brug den affasede del af fortovet, hvis det er muligt. Undgå kantsten, der er højere end 6 cm.

## Dæk

Hvis kørestolen er udstyret med luftfyldte dæk, skal du regelmæssigt kontrollere trykket ved 2,5 bar. I tilfælde af punktering skal du undlade at køre videre og kontakte din forhandler eller et egnet værksted for reparation.

"

# SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VED KØRSEL

---

## Der er risiko for alvorlig personskade, hvis kørestolen vælter.

- Kør kun på skråninger, der ikke overstiger den angivne maksimale vinkel.
- Brug altid tipesikring, når du kører med Eloflex.
- Kørsel ned ad bakke bør altid ske med lavere hastighed.
- Undgå områder, hvor der er risiko for isglatte eller glatte overflader.
- Forsøg aldrig at køre op eller ned ad trapper med din el-kørestol.
- Kør aldrig over forhindringer, der er højere end den anbefalede maksimale højde.
- Undgå hurtige bevægelser med joysticket og pludselige ændringer i kørselsretningen under kørslen.

## Risiko for at sidde fast på afsidesliggende steder.

- En bruger med stærkt nedsat mobilitet bør ikke køre længere strækninger udendørs alene.

## Risiko for skader, hvis den ene fod glider af fodstøtten og falder ind under el-kørestolen under kørsel.

- Placer altid fødderne midt på fodstøtten under kørsel.

## Risiko for skader, hvis du kolliderer med andre genstande.

- Kør gennem smalle passager med lavest mulig hastighed og størst mulig opmærksomhed.
- Vær ekstra opmærksom, når du nærmer dig eller kører tæt på borde på grund af klemningsrisiko mellem bordpladen og joysticket og/eller armlænet.

## Der er risiko for, at kørestolen vælter, hvis tipesikringerne fjernes, beskadiges eller monteres i en position, der afviger fra standardmonteringen.

- Tipesikringen skal altid være monteret, når el-kørestolen bruges.

- Tipesikringen virker kun på et fast underlag. På bløde overflader som f.eks. græsplæner og sne kan tipesikringen miste sin virkning. Kør derfor ekstremt forsigtigt på bløde overflader.

## Kulfiber

For vores kulfibermodeller, bemærk følgende: Dette materiale har et fremragende styrke-til-vægt-forhold, hvilket muliggør den lave samlede vægt. Materialet er dog også mere sprødt end andre materialer såsom aluminium og har større tendens til at revne eller blive punkteret. Derfor skal et kulfiberprodukt generelt behandles mere forsigtigt end andre produkter, og dette gælder også for din Eloflex-kørestol.



# SIKKERHED

---

## Krydsning af jernbanespor

Kryds altid jernbanesporet lige forfra, aldrig skråt fra siden. Kryds aldrig jernbanesporet alene, hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

## Skarpe kanter

Vær forsigtig, når du kører på stejle skråninger, da stolen sandsynligvis vil gå i stykker. Eloflex er testet og godkendt til hældninger på maks. 9 grader. Hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

## Høje kanter

Vær forsigtig, når du kører op eller ud for en kant. Eloflex er testet og godkendt til kanter på op til 6 cm. Hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

## Forflytning

Vi anbefaler, at du altid har en person, der kan hjælpe dig med forflytninger til og fra din Eloflex. Sluk altid for strømmen, før du starter forflytningen. Loft altid armlænen og fodstøtten op, før du forflytter dig, så det bliver lettere at komme ind og ud af stolen.

## Reparer ikke selv

Forsøg aldrig selv at reparere en ødelagt el-kørestol. Hvis du selv forsøger at reparere stolen, gælder garantien ikke. Henvend dig altid til Eloflex eller til den butik eller det hjælpemiddelcenter, der har solgt/forordnet stolen. Modificer aldrig din el-kørestol på egen hånd.

## Intet legetøj

Lad aldrig børn, der ikke normalt bruger en el-kørestol, sidde på eller bruge din Eloflex.

## Rengøring

Rengør aldrig din Eloflex med rindende vand. Tør den kun af med en fugtig klud. Hvis din Eloflex er langsom til at folde op og sammen, kan du smøre samlingerne med olie eller silikonespray.

## Pas på varmen

Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller åben ild. Batterierne kan blive beskadiget, og nogle overflader kan blive så varme, at der er risiko for skader. Du kan bruge din Eloflex fra -10 grader og op til +45 grader. Ved lave temperaturer vil rækkevidden blive påvirket. Kørestolen er antændelsesresistent i henhold til EN 12184.

## Opbevaring

Opbevar din Eloflex uden for børns rækkevidde, når den ikke er i brug. Stolen skal opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30°C.

## Opladeren

Opladeren må aldrig være tildækket, når den bruges til at oplade din Eloflex. Opladeren bliver varm, og der er risiko for ulykker eller skader.

## Batterier

Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys eller på et sted, hvor temperaturen kan komme under nul. Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted. I tilfælde af bortskaffelse skal batterierne genbruges i henhold til nationale/lokale krav. Bemærk, at som alle batteridrevne produkter vil rækkevidden falde med tiden, også i garantiperioden og i produktets levetid.

## Anvendelse

Eloflex el-kørestol er designet til at opfylde en række forskellige behov. Beslutningen om, hvorvidt den er egnet til brugeren, træffes af koordinatoren eller forhandleren og brugeren i fællesskab. Eloflex kan ikke påtage sig ansvaret, hvis el-kørestolen ikke er korrekt tilpasset brugerens behov.

## Ændringer

Din Eloflex skal primært bruges i sin standardkonfiguration. Eventuelle ændringer eller justeringer må kun udføres af dit autoriserede servicecenter eller af Eloflex. Vær opmærksom på, at skader eller funktionsfejl forårsaget af ændringer, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen, eller som skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse, ikke er dækket af garantien.

# GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

---

## **Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i dette dokument.**

- Brug kun el-kørestolen i henhold til instruktionerne i denne manual (se ovenfor, kapitel "Typeklassificering og tilsigtet brug").
- Brug aldrig (sid aldrig i) kørestolen, mens den er under transport i en anden bil/bus.

## **Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen bruges ved nedsat køreevne.**

- Brug ikke kørestolen, når dine køreegenskaber er nedsat på grund af f.eks. sygdom, medicin eller alkohol.

## **Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen ufrivilligt flyttes.**

- Sluk for kørestolen før ind- og udstigning, eller hvis der er risiko for, at du, en anden person eller en genstand kan komme i kontakt med joysticket.
- Når motorene er koblet fra, virker bremsene ikke. Derfor må kørestolen kun skubbes på fladt terræn, aldrig på skrånninger. Efterlad aldrig kørestolen på eller i nærheden af skrånninger med udkoblede motorer.

## **Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen slukkes under kørsel med f.eks. tænd/sluk-knappen eller ved at rive et kabel af, da den stopper med et hårdt ryk.**

- Slip joysticket, når du bremser i en nødsituation. Så stopper kørestolen automatisk.

## **Der er risiko for skader på grund af fald fra kørestolen**

- Bevæg dig ikke fremad, bøj dig ikke forover mellem knæene, og læn dig ikke ud over kørestolens kant, f.eks. for at nå genstande.
- Det anbefales altid at bruge sikkerhedsselen og justere den før hver tur.
- Når du skifter mellem sæder/køretøjer, skal du køre så tæt på den nye position som muligt for at minimere afstanden og risikoen for at vælte kørestolen.

## **Der er risiko for personskade, hvis den maksimalt tilladte belastning overskrides.**

- Overhold den maksimalt tilladte belastning (se kapitlet ""Tekniske data"" bagest i dette dokument).
- El-kørestolen må kun bruges af en enkelt person. Brug aldrig kørestolen til at transportere mere end én person ad gangen.

## **Der er risiko for personskade og beskadigelse af kørestolen, hvis låsen løsnes, når el-kørestolen ikke er korrekt fastspændt under brug.**

- Hvis el-kørestolens lås ikke er klikket ordentligt på

plads, kan stolen pludselig klappe sammen, når den bruges, hvilket kan medføre, at man falder ud af kørestolen.

- Sørg altid for, at låsekrogen er i korrekt position, før du bruger el-kørestolen.
- Der er risiko for personskade og knusningsskader, når kørestolen foldes sammen.
- El-kørestolen skal altid klappes sammen og hæves som beskrevet i brugsanvisningen.
- Vær opmærksom på, at ingen eller intet kommer i klemme, når du folder den sammen og ud.

## **Der er risiko for personskade og beskadigelse af kørestolen, hvis den bruges i fugtige områder.**

- El-kørestolen må ikke bruges under hede.
- El-kørestolen må ikke bruges under badning.
- Undgå at køre i regnvejrlængere tid.

## **EMC**

- Der er risiko for, at kørestolen kan forstyrre eller blive forstyrret af udstyr på grund af elektromagnetiske felter. Dette kan påvirke styringen af kørestolen.
- Denne enhed er udstyret med Bluetooth-sender. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER H2

<b>NETTOVÆGT</b> Uden batterier	19 + 23 kg	<b>MAKS. HÆLDNING</b> Statisk / dynamisk	9° / 6°
<b>SAMLET VÆGT</b> Inkl. batterier	46 kg	<b>MAKS. FORHINDRING</b>	5 cm
<b>HASTIGHED</b>	6,5 km/h	<b>HJUL</b> 2,5 bar	9" for (luft) 13" bag (luft)
<b>RÆKKEVIDDE</b>	30 km*	<b>SÆDE</b> H x B x D	58 x 48-60 x 47
<b>VARIGHED</b> Pr. opladning	5 h	<b>MAKS. BRUGERVÆGT</b>	190 kg
<b>MOTOR</b>	2 x børsteløs motor med høj effekt	<b>JOYSTICK</b>	Højre- eller venstremonteret
<b>MOTOREFFEKT</b>	2 x 350 W	<b>PUDE</b>	Aftagelig, aftageligt betræk
<b>BATTERI</b> +1 ekstra plads	2 x litium-ion 10 Ah / 24 V (240 Wh)	<b>RYGLÆN</b>	Justerbar vinkel 8-30°
<b>BATTERIVÆGT</b>	1,8 kg	<b>MÅL</b> H x B x D	102-112 x 65 x 125 cm
<b>OPLADNINGSTID</b>	3 h	<b>MÅL SAMMENKLAPPET</b> H x B x D	54 x 65 x 98 (93**) cm
<b>VENDERADIUS</b>	94 cm	<b>GARANTI</b>	2 år

\* Afstand under optimale forhold og vil blive påvirket af temperatur, kørestil, højde og batteriets tilstand, osv. For længere rækkevidde og/eller højere brugervægt anbefaler vi at bruge tre batterier.

\*\* Lægstøtte fjernet.

## © Copyright Eloflex

Dette dokument indeholder ophavsretligt beskyttede oplysninger og må ikke kopieres eller gengives helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Eloflex. Eloflex påtager sig intet ansvar for eventuelle typografiske fejl i dette dokument og forbeholder sig ret til at foretage produktændringer.

## Kontakt Eloflex

Hvis du har spørgsmål, brug for hjælp eller oplysninger om produkttilbagekaldelser eller sikkerhedsmeddelelser, bedes du kontakte dit hjælpecenter eller din lokale forhandler. Hvis det er nødvendigt, kan du finde produktets serienummer på et klistermærke på undersiden af kabinettet.

