

EL & FLEX

En helt ny generation af el-kørestole



"Endelig en praktisk og anvendelig el-kørestol til Os som har svært ved at gå og som vil ha' friheden tilbage. Med Eloflex bliver livet lidt lettere"

Eloflex er noget helt nyt

En sammenklappelig el-kørestol med unikke egenskaber som du nemt tager med i bilen og på rejse.

SAMMENKLAPPELIG

Eloflex intelligente konstruktion gør den nem at klappe sammen på få sekunder. Ligesom en klapvogn folder man stolen sammen til det der kan sammenlignes med en mellemstor rejsetaske. Den fylder ikke meget og sammen den lave vægt bliver den let at løfte ind i bilen, at gemme væk i garderoben når den ikke er i brug eller ved indcheckning i lufthavnen. Eloflex kan stadig rulle i sammenklappet stand, hvilket gør at den er ekstremt let at flytte rundt på i sammenklappet stand.



LETVÆGT

Takket være en højkvalitets letvægtsramme i aluminium vejer Eloflex kun 26 kg inklusive et batteri. Dette skal sammenlignes med en traditionel el-kørestol som vejer imellem 80 – 150 kg. Eloflex' lave vægt betyder også at dens rækkevidde bliver længere og at stolen bliver lettere at manøvrere. Den lave vægt og kompakte størrelse gør den let at løfte ind i din egen bil. Endelig slipper du for at være afhængig af Sygetransport og Handikapkørsel - Eloflex giver dig friheden tilbage.


KOMPAKT

Det smarte kompakte design gør Eloflex til et ligeså smidigt alternativ til manuel kørestol. Venderadius er lille og præcisionen høj, hvilket betyder at du let kan navigere rundt i butikker, restauranter og andre steder med lidt plads. Du kommer til at fylde mindre og du kan køre ind på toiletter og du kører igennem de smalleste døråbninger. Din Eloflex fungerer lige godt indendørs som udendørs.





Smart teknik og unikke egenskaber gør Eloflex til markedets mest brugervenlige elkørestol.

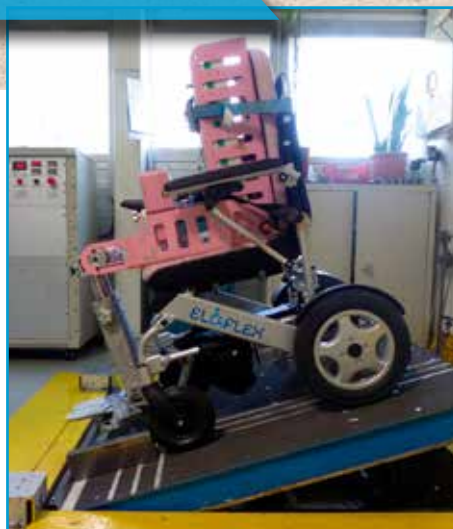

MODERNE TEKNIK

Eloflexstolene er små vidundere. Vi har kombineret intelligent ingeniørkunst, ny teknologi og moderne materialer til en fuldendt og optimal el-kørestol. Vores stole har gennemgående høj kvalitet og super siddekomfort. Precisionen er høj hvilket betyder overlegen stabilitet og gode køreegenskaber. Den smarte sammenklappelige konstruktion gør el-kørestolen ekstra brugervenlig og felksibel samtidigt med at de kompakte mål giver lige så stor tilgængelighed og frihed som en manuel kørestol. En Eloflex kan køre over 30 km (5 timers kørsel) på en enkelt opladning.

TESTET OG GODKENDT

Kvalitet og holdbarhed er vigtige egenskaber for os hos Eloflex. Derfor har vi ladet uafhængige testinstitutter teste og evaluere vores sammenklappelige el-kørestole. Eloflex har bl.a. gennemgået EN12184 testen, den er godkendt af Lægemiddelstyrelsen i Sverige som et medicinteknisk produkt, den er CE-godkendt, testet og godkendt ifølge ISO-7176 samt IEC-60601 og batterierne er flygodkendt ifølge UN38. Med en gennemtestet og godkendt el-kørestol fra Eloflex kan du altså føle dig tryk og sikker. Når du vælger Eloflex får du beviseligt høj kvalitet og stor pålidelighed.

TAG MED I BIL OG PÅ REJSE

Nu kan du som er afhængig af din el-kørestol endelig tage egen bil. En sammenklappelig el-kørestol fra Eloflex klappes sammen og foldes op på få sekunder, og den lave vægt gør at den er let at tage med. Perfekt for dig som vil tage din el-kørestol med i sommerhus, eller på tur med bilen. Eloflex kan desuden checkes ind på flyet og tage med i toget eller bussen. Med batterier som er fly-godkendt, den kompakte størrelse og lave vægt bliver rejsen nem. Vel fremme ved rejsemålet kan du transportere den i lejebil og i almindelig taxa. På hotelværelset optager din Eloflex kun minimal plads.

Lad ikke svage ben holde dig tilbage, fortsæt med at leve et aktivt liv med køreture, rejser og udflugter med bilen.



Med hjælp af Eloflex' sammenklappelige el-kørestol kan du leve dit liv på dine egne vilkår.



En smart el-kørestol

Eloflex er el-kørestolen som passer til al slags brug. Klap den sammen på få sekunder, tag den med i din egen bil eller på flyrejsen, med toget eller bussen. Eloflex giver dig som har svært ved gå friheden tilbage.

Denne stol henvender sig til alle grupper såsom: Aktive kørestolsbrugere som søger en komplementerende smidig el-kørestol. Ældre som ønsker sig friheden til at bevæge sig også selv om benene svigter. Svagere kørestolsbrugere som ikke selv kan køre en manuel kørestol.

Din bedste ven

Mange får svært ved at gå som man bliver ældre eller rammes af sygdom, men det behøver ikke at betyde at du skal tilbringe tiden indendørs eller må fravælge ting du lavede tidligere. Takket være Eloflex kan du nu tage i sommerhus, tage din egen bil til familie og venner eller bestille ferierejsen, selvom dine ben begynder at svigte.

Med Eloflex kan du køre en tur i naturen, hilse på børnebørnene, tage på restaurant eller køre en tur med campingvognen. Med en sammenklappelig el-kørestol beholder du din frihed, livet bliver lettere og behøver ikke at undvære det som gør livet sjovt. Eloflex bliver din bedste ven.

Få friheden tilbage

Frihed handler om øget livsglæde, om at have det godt, om at more sig og klare sig selv. Det er noget som mange synes er indlysende man kan være svært for den som mangler styrke og muskler i benene. At kunne bevæge sig ud i den friske luft, gå en tur for at mærke solens varme stråler skulle være en menneskeret. Med en sammenklappelig el-kørestol fra Eloflex er det nu også muligt for dig som har svært ved at gå.

Nogle af de som bruger Eloflex har haft et hjerteslag, blodprop i hjernen, andre har MS, muskeldystrofi eller Parkinsons og mange er bare blevet ældre og har svært ved at gå.

Alle siger det samme. Eloflex har givet dem friheden tilbage og dermed er deres livsglæde blevet forøget og deres liv har ændret sig til det bedre. Vi forstår naturligvis at Eloflex sammenklappelige el-kørestole ikke er det rigtige for alle, men vi ved at den passer til rigtig mange mennesker.





Det er let at forstå hvorfor en Eloflex kan påvirke hverdagen positivt for mange mennesker.



Dennis Johansson

Eloflex er den optimale el-kørestol når man skal ud og rejse. Let at tage med på flyet helt uden omkostninger. Let og smidig på rejsemålet med sin kompakte størrelse. Fylder ikke meget på hotelværelset og i lejebilen. Dejligt at kunne klare sig selv uden nogen skubber på. Lang rækkevidde og let at køre. Har været i Thailand og USA flere gange. Aldrig mere manuel kørestol for mit vedkommende!



Karin Eriksson

Eloflex har det seneste år gjort mig lykkelig! Jeg er super tilfreds. Fik en frihed som jeg ikke kunne drømme om. Den gav mig et helt nyt liv og jeg har fået et helt nyt syn på mit behov for at bruge kørestol. Dette er det optimale hjælpemiddel, jeg kan køre med kollektiv transport uden hjælp så let som ingenting og det fungerer perfekt i bussen. Jeg kan købe tøj i almindelige butikker og kan endda køre ind i prøvekabinerne. Jeg har været i Norge, boet i campinghytter og kørt på turiststier oppe på Trollstigen. Passer i baggaerummet på vores almindelige lille bil (Volvo S40). Jeg kan virkelig anbefale Eloflex.



Fredrik Asklund,

For mig har Eloflex været som at blev født påny. Stolen er smidig og fungerer både i vores lejlighed og ude i byen. Den bliver accepteret af flyselskaberne som almindelig bagage uden gebyr, og den lave vægt og det at den klappes sammen gør den let at have med i biler og taxa. Eloflex anbefales på det varmeste, et fantastisk transportmiddel som giver dig din bevægelighed tilbage. Eloflex har ført mig hele vejen til alteret!



Ewa-Marie Bengtsson

Jeg har været i London og der gik det fint med at komme frem på gader, i museer og seværdigheder. Har tidligere været både i Barcelona og på de Kanariske Øer, rejser og oplevelser som aldrig ville have været mulige uden min Eloflex sammenklappelige el-kørestol. Denne stol er helt fantastisk, takket være den er man i del af gruppen igen når man er ude og rejse. Vi planlægger en ny rejse til sommer, denne gang til Italien.



Modeller


Der findes en Eloflex til alle brugere.
Der spiller ingen rolle om du er ung,
gammel, stærk eller svag.

Eloflex L-Plus som er vores mest populære model, er valget for vores aktive brugere som holder af at være ude i den friske luft, som kører på ujævne overflader (grus, græs, brosten o.s.v.) og som også er meget ude om vinteren. Den har kraftige motorer, 12 tommer luftfyldte baghjul og 8 tommer massive gummejul foran.



Eloflex M-Plus er en populær model for vores lidt tungere brugere (brugervægt max 150 kg). Med en lavere siddehøjde end L modellen er denne model også velegnet til brugere med kortere ben. Denne model anbefales til hospitaler, alderdomshjem og seniorboliger.

Eloflex L er originalen som med sin siddehøjde på 52 cm passer til de fleste brugere. Integreret væltesikring, dobbelte batterier, lille venderadius og kompakt udformning gør L modellen til det perfekte valg inde som ude. Foldbare armlæn og fodstytte gør den let tilgængelig.

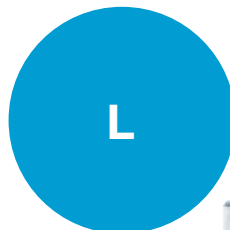

Fakta



MODELL	Eloflex M-plus	Eloflex L	Eloflex L-Plus
Vægt*	26 kg	26 kg	26 kg
Hastighed	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Rækkevidde	30 km	30 km	30 km
Motor	2x trinløs højeffektmotor	2x trinløs højeffektmotor	2x trinløs højeffektmotor
Batteri	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt	2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt
Batterivægt	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Opladningstid	3 tim	3 tim	3 tim
Effekt	2 x 250 watt	2 x 200 watt	2 x 250 watt
Venderadius	80 cm	76 cm	78 cm
Forhjul	8" massive	8" massive	8" massive
Baghjul	12" luft	10" massive	12" luft
Siddehøjde	47 cm	52 cm	52 cm
Sædebredde	46 cm	46 cm	46 cm
Sædedybde	43 cm	43 – 48 cm	43 – 48 cm
Brugervægt	Max 150 kg	Max 120 kg	Max 120 kg
Joystick	Venstre, højre eller på ryglæn**	Venstre, højre eller på ryglæn**	Venstre, højre eller på ryglæn**
Dyne	Aftagelig. Aftageligt hylster	Aftagelig. Aftageligt hylster	Aftagelig. Aftageligt hylster
Ryglæn	Løfte - og sænke funktion	Justerbart trim	Justerbart trim
Mål	90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
-sammenklappet	75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
Garanti	2 år	2 år	2 år
Artikelnr	7350006080029	7350006080067	7350006080043
Salgspris inkl moms	32 990 kr	29 990 kr	32 990 kr

* Totalvægt inkl et batteri / **Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør
 Anbefalet lufttryk for baghjul på Plus-modeller = min 2 kg max 3 kg.



Eloflex er klassificeret som et medicinteknisk hjælpemiddel hos lægemiddelstyrelsen i Sverige, den er CE-godkendt, testet og godkendt ifølge EN12184 og den opfylder gældende krav i loven for medicintekniske produkter.

Ekstraudstyr

Eloflex er en smart el-kørestol. Med vores ekstraudstyr kan du gøre den endnu smartere og tilpasse den efter netop dine behov.



Hjælperstyring



Nakkestøtte



Transportdækken



Fodstøtte



Foldes sammen på få sekunder



1



2



3



4



5

Besøg www.eloflex.dk for yderligere information, film, billeder samt info om nærmeste forhandler.

ELOFLEX

En smart kørestol til alle

Eloflex Danmark
Løvbjerggårdsvej 1 St.
2980 Kokkedal

Telefon: 5151 7788
e-mail: info@eloflex.dk
web: www.eloflex.dk

Ring altid inden du besøger os, så vi kan booke tid.